

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
CT-7 TRAKCIJAS SKANA

IZMANTOŠANA: CT-7 LEG TRACTION SPLINT ir paredzēts, lai nodrošinātu atbalstu un vilkšanu augšstilba kaula vidusdaļas lūzumiem pirmsslimnīcas aprūpes un pacienta transportēšanas laikā.

INDIKĀCIJAS: Ciskas kaula vidusdaļas lūzumi.

PAREDZĒTĀ PACIENTU GRUPA: Pieaugušie un pediatri ar augšstilba kaula lūzumiem, neiesaistot ceļa locītavu.

PAREDZĒTAIS LIETOTĀJS: veselības aprūpes speciālisti un apmācīts personāls, kas nav medicīniskais personāls.

INSTRUKCIJAS:

Lūdzu, noteikti noskatieties īso video mūsu vietnē:

<https://www.faretec.com/training-videos>

1. Izņemiet potītes āķi no ārējās kabatas.
2. Aptiniet potītes āķi ap savainotās kājas potīti.
3. Pārbaudiet, vai tintes āķa sprādze ir vērsta pret pacienta pēdu.
4. Izņemiet šinu no maisa un ļaujiet visām caurulēm nofiksēties.
5. Pievienojiet sprādzi šinas galā pie potītes stiprinājuma.
6. Pievienojiet Ischial/cirkšņa siksnu, aptinot to ap augšstilbu un pievelkot siksnu.
7. Aptiniet abas kāju siksnas ap pacienta kāju, vienu virs ceļgala, otru zem ceļgala.
8. Griezuma vilces mehānisma UZRRIEKSTS šinas pēdas galā. Grieziet bultiņu virzienā, lai panāktu vilkmi.
9. Pārraigiet un atzīmējiet sasniegto vilces garumu.
10. Apstājieties, kad ir pielietota adekvāta vilkšana: ievainotā kāja ir vienāda garuma ar neievainoto kāju, pacients jūtas atvieglots un samazinās pietūkums. Vītņstieņa vilces sistēma liek medikam lēnām un uzmanīgi pielietot vilkšanu, lai pacientam netiktu nodarīts turpmāks kaitējums. Tas arī ļauj viegli pielāgot nelielos soļos.

KLĪNISKIE PRIEKŠROCĪBAS:

- Nodrošiniet atbalstu un saķeri augšstilba kaula lūzumu gadījumā
- Samazina asiņošanu un muskuļu spazmas
- Novērš turpmākus apkārtējo muskuļu, audu un anatomiskās struktūras bojājumus
- Mazina pacienta sāpes

APKOPE UN TĪRĪŠANA:

Pārbaudiet šinu pēc katras lietošanas reizes. Rāmim jābūt brīvam no piesārņojuma. Rāmi var notīrīt ar ziepēm un ūdeni un nosusināt ar vienreizējās lietošanas dvieli. Ja potītes stiprinājumam, kāju siksnām vai siksnām ir kāds piesārņojums vai tie ir nolietoti, neizmantojiet tos atkārtoti, tie būs jāaizstāj ar jauniem. Lai nomainītu, lūdzu, sazinieties ar FareTec: +1-440-350-9510.


KONTRINDIKĀCIJAS: Vilces šinas nedrīkst lietot augšstilba kaula lūzumu, ceļgala lūzumu un/vai mežģījumu, kā arī potītes lūzuma gadījumā.

BRĪDINĀJUMI, PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN IEROBEŽOJUMI: nav

DROŠĀ IZMEKLĒŠANĀS: Produkts jāiznīcina tam paredzētajā vietā, kā to ieteikušas vietējās varas iestādes.

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

PAZIŅOJUMS: Lūdzu, ziņojiet FareTec vai tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietojat šo izstrādājumu, par visiem nopietniem incidentiem, kas ir notikuši un jums ir aizdomas, ka tie ir saistīti ar šo ierīci. Ja jums ir aizdomas par iespējamu defektu vai prece neatbilst jūsu cerībām, lūdzu, ziņojiet par to Uzņēmumam un sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas. Uzņēmuma tālruņa numurs : +1-440-350-9510

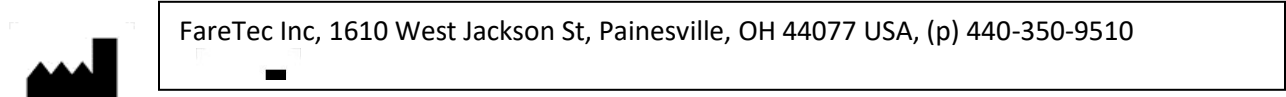

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain



	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use		Catalogue number
	Date of manufacture		Batch code

IF_Ct7v.1_LAT_20240409